



Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung
IM FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V.



Ansprechpartnerin:
Nikki Pearson
E-Mail: Pearson@izw-berlin.de
Mobil: +49 152 382 796 29
Tel. +49 30 5168 728
Leibniz-Institute für Zoo- und Wildtierforschung
Alfred-Kowalke-Str. 17
10315 Berlin

Information

Zu Ihrem Schutz und dem Ihrer Tiere

- **Tragen Sie Handschuhe** beim Probensammeln
- **Desinfizieren** Sie bitte Ihre Handschuhe nach jeder Probenentnahme
- **Entsorgen** Sie alle Einmalartikel bitte nach dem Gebrauch im Restmüll
- **Hände waschen** nach der Probennahme

Zum Schutz der Umwelt

- **Verschließen** Sie alle Proben sofort nach Probennahme
- Lassen Sie keinen Müll in der Umgebung liegen



**Bei Unklarheiten
melden Sie sich gerne!**

Material



Protokoll mit
Probenzugehörigkeit



Stift



Kühlung



Desinfektion



Handschuhe



Mülltüte



Kotröhrchen ohne
Flüssigkeit mit
Etikett



Kotröhrchen mit
Flüssigkeit und
Etikett



Probenbeutel
für kurzfristige
Kotentnahme



Probentüte
für Lagerung

Kotproben



1. Kotröhrchen öffnen.
2. Kotproben (fest od. flüssig) von einem Kothaufen, Anus oder Enddarm gewinnen (Kot hierfür ggf. erst in den Probenbeutel).
3. Kotröhrchen ohne Flüssigkeit: Mit Schaufelaufsatz 7 gehäufte Löffel Kot entnehmen und in das Röhrchen geben und verschließen.
4. Kotröhrchen mit Flüssigkeit: Mit dem Schaufelaufsatz 1 gehäuften Löffel nehmen und in das Röhrchen geben -> fest verschließen -> 10 sec. Schütteln -> Kot muss in Flüssigkeit sein, ansonsten schwenken bis Probenmaterial in der Flüssigkeit eingetaucht ist.
5. Probenprotokoll entsprechend der Proben ID beschriften.
6. Fest verschlossene Kotröhrchen in die Probentüte legen.
7. Innerhalb 24 h kühlen (4°C), Röhrchen mit Flüssigkeit wenn möglich gefrieren (-20°C)



Lagerung:

- Kühlung (4°C) innerhalb 24h
- Tiefkühlung (-20°C) bei längerer Lagerung (nur Röhrchen mit Flüssigkeit)



Versand:

- Proben gut verschließen
- Proben kühlen
- Abholtermin mit Nikki Pearson vereinbaren +49 152 382 796 29

Probenentnahme




Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung
IM FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V.



Ansprechpartnerin:
Nikki Pearson
E-Mail: Pearson@izw-berlin.de
Mobil: +49 152 382 796 29
Tel. +49 30 5168 728
Leibniz-Institute für Zoo- und Wildtierforschung
Alfred-Kowalke-Str. 17
10315 Berlin

Bilder für die Gewinnung von Kotproben am Tierkadaver

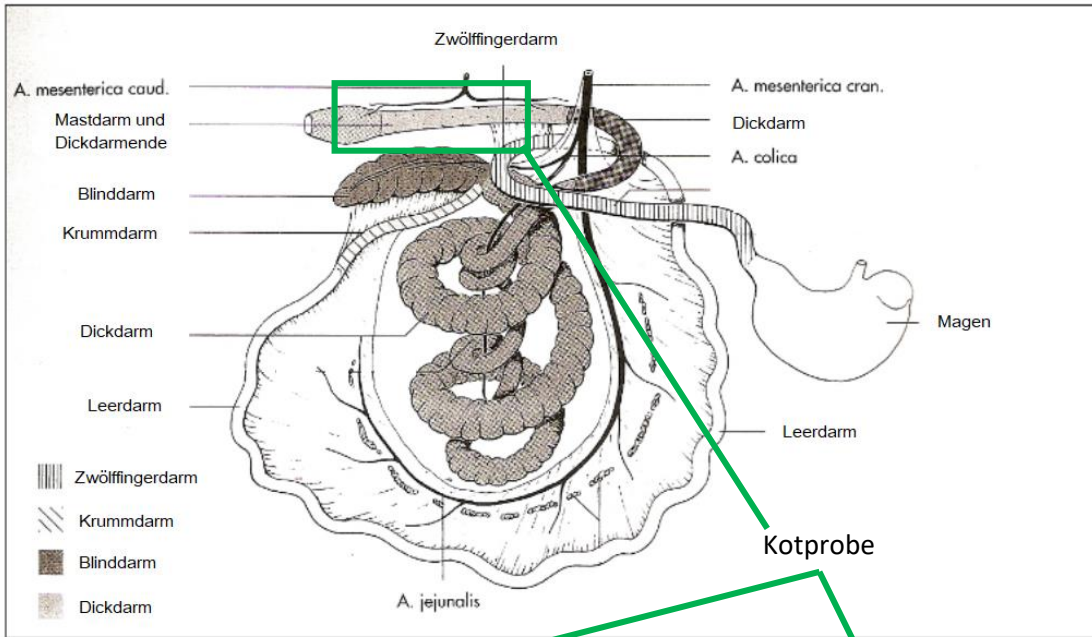

Bei
Unklarheiten
melden Sie
sich gerne!

Abb. 1 | Angepasste schematische Darstellung vom Darm des Schweins (König & Liebig, 2020)

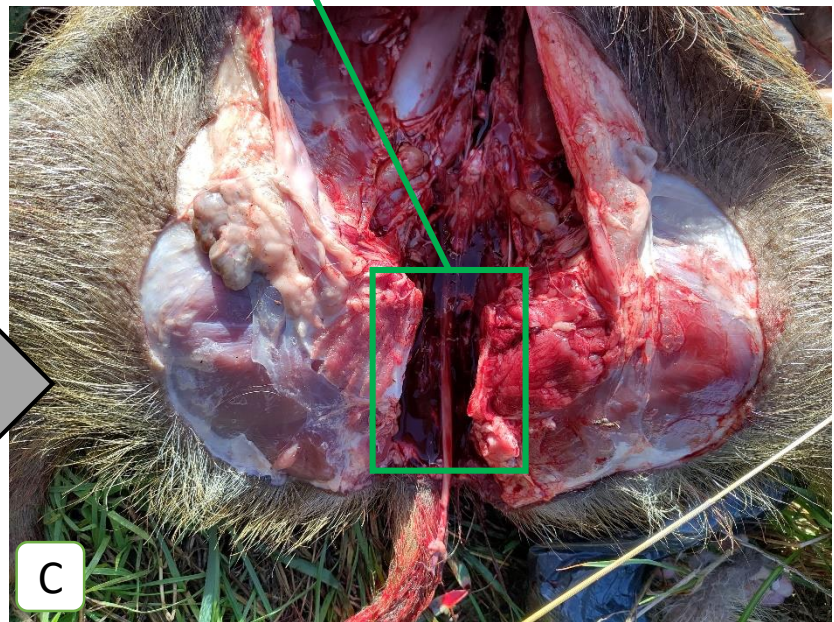
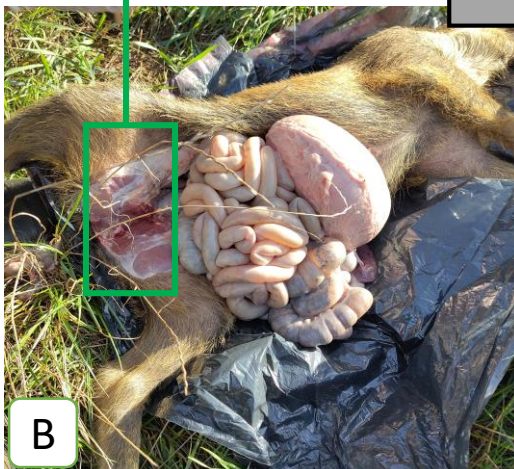
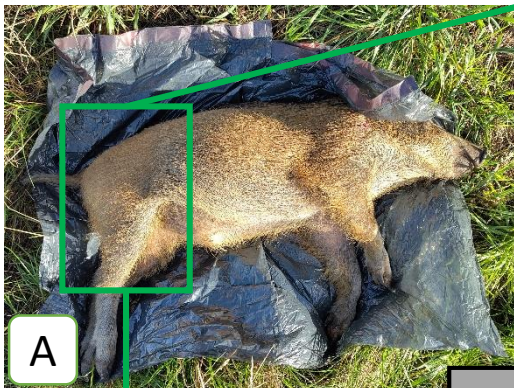


Abb. 2 | Frisch erlegtes Wildschwein (A), mit aufgebrochener Bauchdecke (B) und mit geöffnetem Schloss und entferntem Magen-Darm-Trakt (C). Das grüne Vierecke zeigt immer die Stelle für die Lage des Rektums zur Probengewinnung.